

Fitoroid^{neo}

Hemoroidalne smetnje

Štiteći sluznicu ublažava bol, pečenje i svrbež

Sadrži Helydol, liofilizirani ekstrakt cvatućih vrhova smilja i eterično ulje čajevca


MEDICINSKI PROIZVOD Klasa rizika IIb

Težave s hemoroidi

Z zaščito sluznice lajša bolečino, pekoče občutke in srbenje

Vsebuje Helydol, liofiliziran izvleček iz cvetnih vršičkov laškega smilja in eterično olje čajevca

MEDICINSKI PRIPOMOČEK Razred IIb

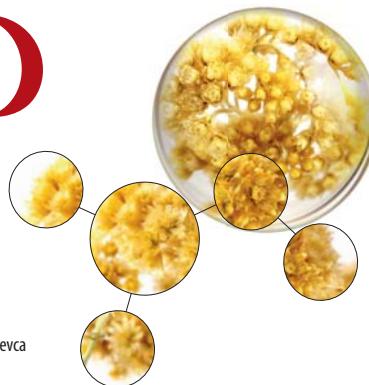

BIO MAST ZA ENDOREKTALNU PRIMJENU - ENDOREKTALNO BIO MAZILo

HR KAKO DJELUJE

NeoFitoroid smiruje iritaciju, štiti sluznicu i potiče njenu normalizaciju sa svoja **3 mehanizma djelovanja**:

- Mukoadhezivno:** prianja na sluznicu i stvara zaštitni sloj koji je štiti od kontakta s nadražujućim tvarima;
- Podmazujuće:** smanjuje trenje sa stolicom te tako štiti od iritacije i perianalnog začepljivanja;
- Antioksidativno:** štiti sluznicu od slobodnih radikala te time neizravno ublažava upalu.

Osim toga, NeoFitoroid stvara okolinu koja nije pogodna za rast mikroorganizama, čime dodatno zaštitno djeluje i smanjuje svrbež.

Njegova **osvježavajuća svojstva** pridonose brzom olakšanju smetnji. NeoFitoroid ne sadrži kortizon ni anestetike, a zahvaljujući svom mehanizmu djelovanja, ne nadražuje niti ne isušuje sluznicu.



Tuba od 40 ml
Sadrži endorektalni
aplikator.

INDIKACIJE

Liječenje **hemoroida** (unutarnjih i vanjskih) i **simptoma** povezanih s njima, kao što su: **bol, pečenje i svrbež analnog i perianalnog područja**. Može se upotrebljavati **i kod prisutnosti analnih fisura**. Također se može koristiti i za **prevenciju, kao i u svim situacijama** koje mogu uzrokovati **iritaciju i/ili začepljivanje** analnog i perianalnog područja (zatvor, proljev, nepravilna prehrana i stil života). Pogodan **i tijekom trudnoće i dojenja**.

NAČIN PRIMJENE

Za vanjsku primjenu: namazati i nježno umasirati na analno i perianalno područje. Za unutarnju primjenu: upotrijebite namjensku endorektalnu cjevčicu koju treba pričvrstiti na tubu. Nanesite dovoljnu količinu masti koja će pokriti zahvaćeno područje. Proizvod upotrijebite nakon pražnjenja crijeva te nakon pažljivog pranja analnog i perianalnog područja. Ako želite spriječiti iritaciju uzrokovanoj trenjem, tada ovaj tretman provedite prije pražnjenja crijeva, uz ponovnu primjenu i nakon pražnjenja. Nakon uporabe, odvijte cjevčicu, dobro je operite toploim vodom i sapunom te zatvorite tubu masti. Moguće ju je nanjeti više puta dnevno, čak i u kratkim razmacima i kroz dulje vremensko razdoblje.

SASTAV

Djelatne tvari: Liofilizirani ekstrakti lipofilne frakcije cvatućih vrhova smilja, (Helydol)* i veprinov podanak*; gel iz dehidriranih lista aloe vere*; vodena otopina cvatućih vrhova smilja*, uljni ekstrakt cvatućih vrhova kantariona*; ulje jojobe*; shea maslac*; eterična ulja: čajevca, čempresa i paprene metvice.

Ostali sastojci: gliceril stearat, kaprilni/kaprinski triglicerid, saharozni distearat, saharozni stearat, cetilstearyl alkohol, biljni glicerin, trihidroksistearin, biljna ulja, hidrogenizirana biljna ulja, kandeljiski vosak, ksantan guma, limunska kiselina, tokoferoli, natrijev silikat, benzilni alkohol, kalijev sorbat, natrijev dehidroacetat, suncokretovo ulje.

*Sastojak dobiven iz ekološkog, poljoprivrednog uzgoja

UPOZORENJA

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti ili alergije na jedan ili više sastojaka. U slučaju da ne dođe do poboljšanja simptoma, обратите se liječniku.

Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline i izravne svjetlosti. Čuvati izvan dohvata djece. Rok valjanosti odnosi se na neotvoren i pravilno čuvan proizvod.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti naveden je na pakiranju. Ne koristiti nakon navedenog roka valjanosti. Preporuča se upotrijebiti proizvod u roku 4 mjeseca od otvaranja.

PAKIRANJE ZA PRODAJU

Tuba od 40 ml Sadrži endorektalni aplikator.

Datum posljednje revizije: 02/2015.

SL KAKO DELUJE

NeoFitoroid pomirja draženje, ščiti sluznico in spodbuja njeno normalizacijo s **3 mehanizmi delovanja:**

- Mukoadhezivno:** tvori zaščitno oblogo, ki se oprime sluznice in jo ščiti pred stikom z dražilnimi snovmi;
- Mazalno:** zmanjšuje trenje z blatom, s čimer ščiti pred draženjem in perianalno obstrukcijo;
- Antioksidativno:** ščiti sluznico pred prostimi radikalji, s čimer posredno lajša vnetje.

Poleg tega **NeoFitoroid ustvarja neugodno okolje za rast mikroorganizmov**, kar pripomore k dodatnemu zaščitnemu učinku in ublažitvi srbenja. Njegove **osvezilne lastnosti** hitro olajšajo nelagodje. **NeoFitoroid** ne vsebuje kortizona ali anestetikov, zaradi svojega mehanizma delovanja pa ne razdraži ali izsuši sluznice.



40-ml tuba
Vsebuje endorektalni aplikator.

INDIKACIJE

Zdravljenje težav s **hemoroidi** (notranjimi in zunanjimi) in z njimi povezanih **simptomov**, kot so **bolečina, pekoč občutek in analno ter perianalno srbenje**. Uporablja se lahko tudi **ob prisotnosti analnih fisur**. Prav tako je lahko koristen za **preprečevanje in v vseh situacijah**, ki lahko povzročijo **draženje in/ali obstrukcije** analnega in perianalnega področja (zaradi zaprtja, driske, prehrane in nepravilnega načina življenja). Primerno tudi za uporabo **med nosečnostjo in dojenjem**.

NAČIN UPORABE

Za zunanjou uporabo namažite in nežno masirajte po analnem in perianalnem področju. Za notranjo uporabo uporabite posebno endorektalno kanilo, ki ga privijete na tubo. Nanesite zadostno količino mazila, da prekrijete prizadeto področje. Izdelek uporabite po odvajanju in temeljitem umivanju analnega in perianalnega področja. Da bi preprečili draženje zaradi trenja, izdelek nanesite pred odvajanjem in nato ponovite nanos tudi po odvajjanju. Po uporabi odvijte kanilo in ga temeljito očistite z vročo vodo in milom ter zaprite tubo mazila. Nanos lahko ponovite večkrat na dan, tudi v kratkih presledkih. Izdelek je primeren tudi za dolgotrajno uporabo.

SESTAVA

Funkcionalne sestavine: Liofilizirani izvlečki iz cvetnih c smilja, lipofilna frakcija (Helydol)* in korenika bodeče lobodičke*; gel iz dehidriranih listov aloje*; vodna raztopina cvetnih vršičkov laškega smilja*; oljni izvleček iz cvetnih vršičkov šentjanževke*; jojobino olje*; karitejevo maslo*; eterična olja: čajevca, ciprese in poprove mete.

Vsebuje tudi: gliceril stearat, kaprinski / kaprini triglicerid, distearat saharoze, stearat saharoze, cetilstearil alkohol, rastlinski glicerin, trihidroksistearin, rastlinska olja, hidrogenirana rastlinska olja, kandelilin vasek, ksantan gumi, citronska kislina, tokoferoli, natrijev silikat, benzil alkohol, kalijeve sorbat, natrijev dehidroacetat, sončnočno olje.

*Sestavina, pridobljena z ekološko kmetijsko pridelavo

OPOZORILA

Ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več sestavin. Če se težave ne izboljšajo, svetujemo posvetovanje z zdravnikom.

Hranite pri sobni temperaturi, stran od virov topote in zaščiteno pred svetlobo. Hranite izven dosega otrok. Datum izteka roka uporabnosti velja za neodprt in pravilno shranjen izdelek.

ROK UPORABNOSTI

Glejte rok uporabnosti, ki je natisnjena na embalaži. Izdelka ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti. Svetujemo, da izdelek porabite v roku 4 mesecev po odprtju.

PRODAJNO PAKIRANJE

40-ml tuba

Vsebuje endorektalni aplikator.

Datum zadnje posodobitve navodila: 02/2015



Aboca S.p.A. Società Agricola Località Aboca, 20 Sansepolcro 52037 (AR) – Italia – www.aboca.com

Tvrta sa certifikatima za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 te za sustav upravljanja okolišem ISO 14001.

Podjetje s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 13485 ter sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.



HRLEAP02-A