

Mediblink®
medical devices

Electric Nasal Aspirator SuperEasy M405



Mediblink®

3 YEARS
WARRANTY

www.mediblink.com



Silent operation
Geräuschloser Betrieb
Tiho delovanje
Tihi rad



3 Levels of suction
3 Stufen der Absaugung
3 stopnje sesanja
3 stupnja isisavanja



Safe to use for all ages
Sicher in der Anwendung
für alle Altersgruppen
Varna uporaba za
osebe vseh starosti
Sigurno za korištenje
za sve uzraste



2 Soft Silicone suction nozzles
for gentle suction
2 weiche Nasensaugaufsätze
für sanftes Saugen
2 nastavka iz mehkega
silikona za nežno isisavanje
2 mekana silikonska nastavka
za nježno isisavanje




High efficiency due to
Pulse suction technology
Hohe Effizienz durch
pulsierende Saugtechnik
Visoka učinkovitost zaradi
tehnologije pulznega
isisavanja
Visoka učinkovitost
zahvaljujući tehnologiji
impulsnog isisavanja



Low energy usage for
app. 70 uses
Niedriger Energieverbrauch
für ca. 70 Anwendungen
Nizka poraba energije
za približno 70 uporab
Niska potrošnja energije
za približno 70 korištenja



Easy to clean
Leicht zu reinigen
Enostavno čiščenje
Lako se čisti

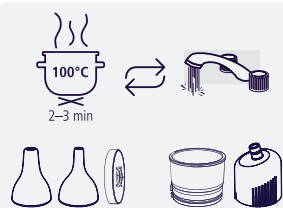

Global Anti-Backflow Patent
Globales Anti-Rückfluss-Patent
Globalni patent za
preprečevanje povratnega toka
Globalni patent
protiv povratnog protoka


EN Unique patented design safely holds
fluids in a container without spilling.

DE Einzigartiges patentiertes Design, das
Flüssigkeiten sicher auffängt, ohne sie
zu verschütten.

SLO Edinstvena patentirana zasnova varno
zadržuje tekočine, ne da bi se razlile.

HR Jedinstveni patentirani dizajn sigurno
zadržava tekućinu u spremniku bez
prelivanja.

Anti-Overflow Technology
Anti-Überlauf Technologie
Tehnologija za
preprečevanje preliivanja
Tehnologija protiv prelijevanja

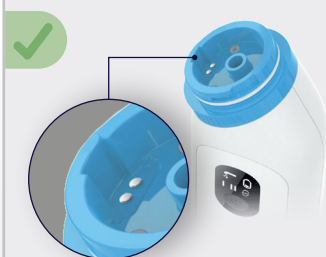


EN Longer life span with automatic shut-
down in case of over-flow.

DE Verlängerte Lebensdauer mit
automatischer Abschaltung bei Überlaufen.

SLO Podaljšana življenjska doba s samodejnim
izklopom v primeru preliivanja.

HR Produženi vijek trajanja s automatskim
isključivanjem u slučaju prelijevanja.

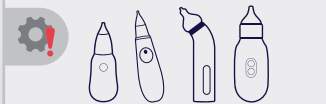

EN Nasal aspirators without overflow sensors
malfunction quickly.

DE Nasensauger ohne Überlaufsensoren neigen
dazu, schnell zu versagen.

SLO Nosni aspiratorji brez senzorjev
za preliivanje se hitro pokvarijo.

HR Nosni aspiratori bez senzora preliivanja
brzo se znaju pokvariti.

EN Mediblink Electric Nasal Aspirator SuperEasy M405

Intended Use: The device which is a portable, handheld, reusable, battery-powered suction device, is intended to enable an adult to gently suction and clear excessive mucus from the nasal passages of an infant or child to facilitate easier breathing in home care. The aspirator features a handy design and is both safe and easy to use. Two different sizes of soft silicone suction nozzles enable safe product use. Aspirator offers highly efficient suction with three speed levels and pulse suction technology, automatic shut-down in case of overflow to ensure long-lasting device use, a patented anti-backflow design for clean and hygienic use and a child-friendly, low-noise suction function (<60dB(A)). The suction nozzles, collection cup and cover are removable and can simply be cleaned under running water and to disinfect. The warranty period is three years. **Content:** 1 Nasal aspirator, 2 Suction nozzles (1 wide, 1 narrow), 2 Sealing rings, 1 User manual, 3 AAA alkaline batteries.

Warnings: The nasal aspirator is intended only for the suction of nasal secretions. Please do not use it for other purposes. If the user's nose is dry, it should be humidified first. Keep the suction nozzles clean and sanitary when in use. Keep the aspirator out of the reach of children under 12 years old. Potential choking hazard. Do not immerse the main part of aspirator in water or other liquids, and do not rinse it directly under the tap. Read the instructions for use before using the aspirator.

DE Mediblink Elektrischer Nasensauger SuperEasy M405

Verwendungszweck: Bei dem Gerät handelt es sich um ein tragbares, wiederverwendbares, batteriebetriebenes Absauggerät, mit dem ein Erwachsener die Nasengänge eines Säuglings oder Kindes sanft absaugen und von überschüssigem Schleim befreien kann, um das Atmen in der häuslichen Pflege zu erleichtern. Der Sauger hat ein praktisches Design und ist sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung. Zwei verschiedene Größen von weichen Silikon-Nasensaugaufsätzen ermöglichen eine sichere Anwendung des Produkts. Der Sauger bietet eine hocheffiziente Absaugung mit drei Geschwindigkeitsstufen und pulsierender Absaugungstechnologie, eine automatische Abschaltung bei Überlauf, um eine lange Nutzungsdauer des Geräts zu gewährleisten, ein patentiertes Anti-Rücklauf-Design für eine saubere und hygienische Nutzung sowie eine kinderfreundliche, geräuscharme Absaugfunktion (< 60 dB (A)). Die Silikon-Nasensaugaufsätze, der Auffangdeckel und der Becher sind abnehmbar und können einfach unter fließendem Wasser gereinigt und desinfiziert werden. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre. **Inhalt:** 1 Nasensauger, 2 Nasensaugaufsätze (1 breit, 1 schmal), 2 Dichtungsringe, 1 Gebrauchsanweisung, 3 AAA-Alkalibatterien.

Warnungen: Der Nasensauger ist nur zum Entfernen von Nasensekret geeignet. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Wenn die Nase des Benutzers trocken ist, sollte sie zunächst befeuchtet werden. Halten Sie die Düsen Spitzen während des Gebrauchs sauber und hygienisch. Bewahren Sie den Absauger außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren auf. Potenzielle Erstickengefahr. Tauchen Sie den Hauptteil des Saugers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und spülen Sie ihn nicht direkt unter dem Wasserhahn ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Sauger in Betrieb nehmen.

SLO Mediblink Električni nosni aspirator SuperEasy M405

Predvidena uporaba: Izdelek je prenosni, ročni pripomoček za isisavanje nosne sluzi za večkratno uporabo, ki ga napaja baterija, in je namenjen odraslim osebam, da nežno isesajo in odstranijo prekomerno sluz iz otrokovih nosnih poti ter mu tako olajšajo dihanje pri negi na domu. Aspirator ima priročno obliko ter je varen in enostaven za uporabo. Dve različni velikosti nosnih nastavkov iz mehkega silikona omogočata varno uporabo izdelka. Aspirator ponuja zelo učinkovito isisavanje s tremi stopnjami moči in tehnologijo pulznega isisavanja, samodejni izklop v primeru preliivanja, ki zagotavlja dolgotrajno uporabo naprave, patentirano zasnovo proti povratnemu toku za čisto in higiensko uporabo ter otrokom prijazno funkcijo isisavanja z nizko stopnjo hrupa (< 60 dB (A)). Nosna nastavka, posodico in pokrov zbiralnika je mogoče odstraniti in jih preprosto očistiti pod tekočo vodo ter dezinficirati. Garancija velja tri leta. **Vsebina:** 1 nosni aspirator, 2 nosna nastavka (1 širok, 1 ozek), 2 tesnilna obročka, 1 navodilo za uporabo, 3 alkalne baterije AAA.

Opozorila: Nosni aspirator je primeren le za odstranjevanje nosnih izločkov. Ne uporabljajte ga v druge namene. Če je otrokov nos izsušen, ga je treba najprej navlažiti. Nosni nastavki naj bodo pred uporabo čisti in higiensko neoporečni. Aspirator hranite zunaj doseg a otrok, mlajši od 12 let. Potencialna nevarnost zadušitve. Glavne dela aspiratorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in ga ne spirajte neposredno pod tekočo vodo. Pred uporabo aspiratorja preberite navodila za uporabo.

Zastopnik in distributer za SLO: Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje, Tel.: +386(0)730-44-555; www.prolat.si

HR Mediblink Električni nosni aspirator SuperEasy M405

Predvidena namjena: Uređaj koji je prijenosni, ručni, za višekratnu upotrebu – uređaj za isisavanje na baterije namijenjen je upotrebi odrasle osobe u kućnoj njezi da nježno isisa i ukloni višak sluzi iz nosnih prolaza bebe odnosno djeteta kako bi se olakšalo disanje. Aspirator ima praktičan dizajn te je siguran i jednostavan za korištenje. Dvije različite veličine mekih silikonskih nastavaka omogućuju sigurnu upotrebu proizvoda. Aspirator nudi visoko učinkovito isisavanje iscedaka iz nosa s tri razine brzine i tehnologijom impulsnog isisavanja, automatskim isključivanjem u slučaju prelijevanja kako bi se osigurala dugotrajna upotreba uređaja, patentirani dizajn protiv povratnog protoka za čistu i higijensku upotrebu te funkciju isisavanja s niskom razinom buke prilagođenu djeci (<60 dB (A)). Nastavci, posudica i poklopac posudice odvojivi su i mogu se lako očistiti pod mlazom vode i dezinficirati. Jamstveni rok je tri godine. **Sadržaj:** 1 nosni aspirator, 2 nastavka za isisavanje (1 širok, 1 uski), 2 brtve, 1 korisnički priručnik, 3 alkalne baterije AAA.

Upozorenja: Nosni je aspirator prikladan samo za uklanjanje iscedaka iz nosa. Ne koristite ga u druge svrhe. Ako je nos suh, prvo ga treba ovlažiti. Održavajte silikonske nastavke čistima i higijenskim tijekom upotrebe. Aspirator držite izvan dohvata djece mlađe od 12 godina. Potencijalna opasnost od gušenja. Ne uranjajte kućište aspiratora u vodu ili druge tekućine i ne ispirite ga izravno pod slavinom. Prije upotrebe aspiratora pročitajte uputstva za upotrebu.

Zastupnik i distributer za HR: Golia d.o.o., XI Vrbik 3, 10000 Zagreb, Tel.: +385(0)161-98-496; www.golia.hr



Manufactured for (importer for EU & distributor) / Hergestellt für
(importeuer für EU & distributor) / Proizvedeno za (uvoznik za EU
& distributor):
Mediblink d.o.o., Gubčeva cesta 19,
8210 Trebnje, Slovenija

Mediblink® is a registered trademark.
©Packaging design is copyright.
No infringements of our trademarks
and copyright material is allowed.
www.mediblink.com

Hetaida Technology Co., Ltd.
Room 801, 802, 803, 804, 901, 2# Building Scientific Research
Center No.6 Minfu Road, Liaobu Town, Dongguan City,
Guangdong Province, P.R.China

e-FU: <http://www.mediblink.com/f/m405.pdf>

1.0, 30.5.2025



LOT

REF
M405

