

Side 1
87 mm

Side 2
87 mm



NAVODILA ZA UPORABO

Stekleni termometer s tekočino

SPECIFIKACIJE

Območje merjenja: 35,5 °C do 42,0 °C
Ločljivost: 0,1 °C
Natančnost: +0,1 °C / -0,15 °C
Delovni pogoji: Temperatura: -15 °C do 42 °C
(Možno je meriti le temperature, ki so višje od temperature okolice!)

Pogoji shranjevanja: Temperatura: -15 °C do 42 °C
Opis: Izdelava in testiranje termometrov potekata v skladu z veljavnimi standardi.
Zagotavljanje kakovosti:
*Uredba 2017/745 o medicinskih pripomočkih
*Standard EN12470-1:2000+A1:2009 Klinični termometri, 1. del: Kovinski tekočinski termometri s kazalnikom najvišje temperature.
Rok uporabe: 5 let.

NAMEN UPORABE


Tekočinski stekleni termometer brez živega srebra za merjenje telesne temperature.
Analogni maksimalni termometer s tekočinskim kazalcem.

PRILOŽENI MATERIALI

S/N	Vsebina pakiranja	Količina
1	Tekočinski stekleni termometer brez živega srebra	1
2	Plastični etui z orodjem za enostavno ponastavitev temperature »easy flip«	1

NAČELO DELOVANJA

Tekoča kovinska zlitina je nova, netoksična merilna tekočina, ki je okolju prijazna. Termometer brez živega srebra je razvil Hangzhou Long Can Liquid Metal Technology Co., Ltd in vsebuje patentirano zlitino tekočih kovin, sestavljeno iz galija, indija in kositra. Tekoča kovinska zlitina je popolnoma nestrupena in okolju prijazna.

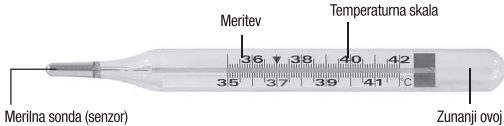

POSTOPEK UPORABE

- Termometer naj uporabljate le ena oseba. Pred in po vsaki uporabi ga je treba razkužiti, da se prepreči navzkrižna okužba. Termometer obrišite z robčkom, prepojenim s 75% alkoholom, vsaj petkrat.
- Pred merjenjem telesne temperature preverite, ali je tekočinski stolpec pod 36°C.
- Način merjenja: pod pazduho
Obrišite pazduho s suho brisačo. Vstavite merilno konico v pazduho in roko trdno pritisnite ob telo.
- Po približno 4 minutah bo termometer prikazal telesno temperaturo. Tekočina v merilnem stolpcu bo pokazala izmerjeno vrednost na temperaturni lestvici. Običajna telesna temperatura je približno 36,7°C.
- Temperaturo odčitajte z nežnim obračanjem termometra naprej in nazaj.
- Po merjenju je treba tekočino povrniti na začetek lestvice. Termometer vrnite v plastični etui in trdno privijte pokrovček z orodjem za enostavno ponastavitev temperature »easy flip«. Termometer držite za to orodje in ga stresajte pod kotom 45° glede na tla, dokler tekočinski stolpec ne pade pod 35,5°C. Za podrobnosti glejte sliko desno.



PREVIDNOSTNI UKREPI

- Zaščitite termometer pred padci in ga ne izpostavljajte udarcem.
- Ne upogibajte ali grizite konice termometra.
- Shranjujte izven dosega otrok.
- Termometrov s poškodovanim ohišjem ne uporabljajte (nevarnost poškodbe).
- OPOZORILO: Otroka mora med celotnim merjenjem temperature nadzorovati odrasla oseba.
- Merilna tekočina, ki je tekoča kovinska zlitina, ne sme priti v stik z žlahtnimi ali lahкими kovinami, saj z njimi reagira.
- Med merjenjem ravnajte pazljivo in odgovorno, da preprečite poškodbe.
- Če se termometer razbije, razlito tekočino odstranite s čopičem, robčkom ali krpo, navlaženo z milnico. Razbite dele lahko odvržete med gospodinske odpadke.

GARANCIJA

Ob normalni uporabi proizvajalec daje neomejeno garancijo na delovanje in natančnost tega termometra (razen v primeru razbitja stekla). Poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja, niso vključene v garancijo.

TABELA SIMBOLOV

	Uporabno do		Oglejte si navodila za uporabo
	Številka serije (lot)		Proizvajalec
	Pozor / Opozorilo		Pooblaščen predstavnik v Evropski uniji
	Enotna identifikacija medicinskega pripomočka (UDI)		Omejitev zlaganja
	Temperaturna omejitev		Hraniti na suhem
	Krško – ravnajte previdno		CE oznaka
	Datum proizvodnje		Medicinski pripomoček
	Uvoznik		Distributer

POROČANJE O INCIDENTIH

Vsak dogodek, ki vključuje poškodbe ali okvare, prijavite službi za pomoč uporabnikom podjetja Hangzhou Long Can Liquid Metal Technology Co., Ltd., svojemu prodajnemu predstavniku ali pristojnemu regulatornemu organu.

Hangzhou Long Can Liquid Metal Technology Co., Ltd.
1st Floor & 4th Floor, Gate 2, No.18 Zhiren Street Puyan Binjiang District
310051 Hangzhou, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
TEL: +86-571-28217812
FAX: +86-571-28217811
SRN: CN-MF-000020602

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2595AA The Hague, THE NETHERLANDS.
E-mail: info@lotusnl.com
Tel: +31644168999
SRN: NL-AR-000000121

PXG Pharma GmbH
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Germany.
www.pxgpharma.com

INSTRUCTION VERSION AND MODIFICATION DATE
Approved on March 12, 2024. Version: A/3
Rev.002 10/2025



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Higanymentes Üveg Lázmérő

SPECIFIKÁCIÓ

Tartomány: 35,5 °C és 42,0 °C között
Felbontás: 0,1 °C
Pontosság: +0,1 °C / -0,15 °C
Működési feltételek: Hőmérséklet: -15 °C és 42 °C között (csak a környezeti hőmérséklet feletti hőmérsékletek mérhetők!)

Tárolási feltételek: Hőmérséklet: -15 °C és 42 °C között
Leírás: A hőmérők gyártása és tesztelése a vonatkozó szabványoknak megfelelően történik.
Minőségi garancia:
*Az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 rendelet
*az EN12470-1:2000+A1:2009 Klinikai hőmérők, 1. rész Folyékony fém üvegben típusú hőmérők csúcstértékelzővel.
Eltarthatósági idő: 5 év.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT


Higanymentes, folyékony fém üvegben lázmérő a test hőmérsékletének mérésére.
Analog csúcstértékelzős lázmérő folyadékmérővel.

BIZTOSÍTOTT ANYAGOK

S/N	Anyagok	Mennyiség
1	Higanymentes üveg lázmérő	1
2	Műanyag tok „könnyű lerázni” füllel	1

AZ ELJÁRÁS ELVE

Folyékony fém – egy új, nem mérgező mérőfolyadék, amely környezetbarát. A higanymentes lázmérőt a Hangzhou Long Can Liquid Metal Technology Co., Ltd fejlesztette ki, és egy szabadalmaztatott folyékony ötvözetet tartalmaz, amely gallumból, indiumból és ónból áll. A folyékony fém teljes mértékben nem mérgező és környezetbarát.

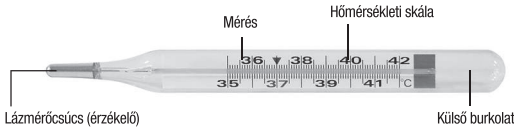

ELJÁRÁS

- A lázmérőt egy személynek kell használnia, és minden használat előtt és után fertőtleníteni kell, hogy megelőzzék a keresztfertőzést. A hőmérséklet mérés előtt és után a lázmérőt több mint 5 alkalommal 75%-os alkoholos törítőkendővel lehet megtörölni.
- A beteg hőmérsékletének mérése előtt ellenőrizze, hogy a folyadékoszlop 36 °C alatt van-e.
- Mérési módszer: hónalj
Törölje meg a hónalját egy száraz törülközővel. Helyezze az érzékelőt a hónaljba, és tartsa a beteg karját szorosan a testéhez.
- Körülbelül 4 perc múlva a lázmérő eléri a testhőmérsékletet, és a lázmérő mérőkapillárisában lévő folyadék a hőmérsékleti skálán megmutatja a mért testhőmérsékletet. A normális testhőmérséklet általában 36,7 °C.
- A hőmérsékletet a lázmérő óvatos előre-hátra forgatásával lehet leolvasni.
- A mérés után a folyadékot vissza kell juttatni a skála aljára. Ehhez helyezze vissza a lázmérőt a műanyag tokjába, és csavarja vissza szorosan a kupakot, amivel könnyű lerázni a lázmérőt. Fogja meg a lázmérőt a könnyen lerázható eszköznél, és rázza meg 45 fokban a talajjal, amíg a lázmérőben lévő folyadékcso 35,5 °C alá nem csökken. A részleteket lásd a jobb oldali képen.



ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Ne ejtse le a lázmérőt és ne tegye ki hirtelen ütéseknek.
- Ne hajlítsa meg és ne harapja meg a lázmérő hegyét.
- Tartsa a lázmérőt gyermekektől elzárva.
- A sérült külső burkolatú lázmérőket nem szabad használni (sérülésveszély).
- MEGJEGYZÉS: A hőmérsékletmérés teljes folyamata alatt a gyermekeket fel kell figyelnie.
- A folyékony fém mérőfolyadék nem kerülhet érintkezésbe nemesfémekkel vagy könnyűfémekkel, mivel ezekkel a fémekkel reakcióba lép.
- A mérés során kérjük, tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a veszélyek és sérülések elkerülése érdekében.
- Ha a lázmérő eltörik, a kiömlött folyadékot szappanos vízzel megnedvesített kefével, papírtörülővel vagy ruhával lehet eltávolítani. A törmelékeket háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

JÓTÁLLÁS

Normál használat esetén a gyártó korlátlan garanciát vállal a lázmérő működőképességére és pontosságára (kivéve az üveg törése esetén). A lázmérő nem megfelelő kezelésből eredő sérülések nem tartoznak a garancia hatálya alá.

JELMAGYARÁZAT

	Felhasználhatósági idő		Olvassa el a használati utasítást
	Gyártási szám		Gyártó
	Figyelmeztetés		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Egyedi eszközazonosító		Rakodási határérték
	Hőmérsékleti határérték		Száraz helyen tárolandó
	Törékeny, óvatosan kezelendő		CE jelölés
	Gyártási dátum		Orvostechnikai eszköz
	Importőr		Forgalmazó

VÁRATLAN ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE

Bármely sérüléssel vagy meghibásodással járó eseményt jelentsen a Hangzhou Long Can Liquid Metal Technology Co., Ltd. ügyfélszolgálatának, értékesítési képviselőjének vagy az illetékes hatóságnak.

Hangzhou Long Can Liquid Metal Technology Co., Ltd.
1st Floor & 4th Floor, Gate 2, No.18 Zhiren Street Puyan Binjiang District
310051 Hangzhou, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
TEL: +86-571-28217812
FAX: +86-571-28217811
SRN: CN-MF-000020602

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2595AA The Hague, THE NETHERLANDS.
E-mail: info@lotusnl.com
Tel: +31644168999
SRN: NL-AR-000000121

PXG Pharma GmbH
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Germany.
www.pxgpharma.com

ÚTMUTATÓ VERZIÓJA ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA
Jóváhagyva 2024. március 12-én. Verzió: A/3
Rev.002 10/2025