

1




- EN** Press the power/test button and wait until display is activated
- SLO** Pritisnite gumb za vklop/merjenje in počakajte, da se zaslon aktivira
- HR** Pritisnite gumb za napajanje/testiranje i pričekajte da se zaslon aktivira

2




- EN** Select the appropriate age group
- SLO** Izberite ustrezno starostno skupino
- HR** Odaberite odgovarajuću dobnu skupinu

3

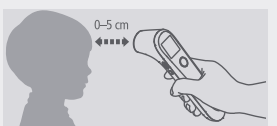

- EN** Aim at the forehead/object with a distance less than 5 cm and press test button
- SLO** Usmerite v čelo/predmet z razdalje manj kot 5 cm in pritisnite gumb za merjenje
- HR** Usmerite u čelo/predmet s udaljenosti manje od 5 cm i pritisnite gumb za testiranje

4

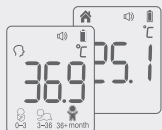

- EN** Read the body/object temperature
- SLO** Odčitajte temperaturo telesa/predmeta
- HR** Očitajte temperaturu tijela/predmeta



e-FU: <http://www.mediblink.com/f/m330.pdf>

UDI

Mediblink
medical devices

Infrared Forehead Thermometer Age Accuracy™



Fast & Accurate



Body Temperature



Object, Liquid & Ambient Temperature



Sound ON/OFF

NEW

Age Accuracy™


Select patient's age for accurate measurement



3
YEARS
WARRANTY

www.mediblink.com

3-COLOR DISPLAY 3-BARVNI ZASLON ZASLON U 3 BOJE

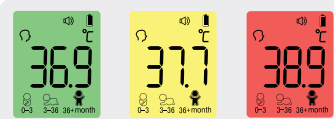


Indicates no fever
Označuje, da ni vročine
Označava da nema vrućice


Indicates fever
Označuje vročino
Označava vrućicu

Indicates high fever
Označuje visoko vročino
Označava visoku vrućicu


MULTIFUNCTIONAL VEČNAMENSKI VIŠENAMJENSKI

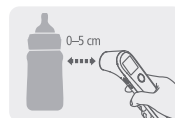

- Object Temperature
- Temperatura predmeta
- Temperatura predmeta

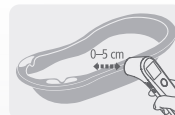

- Liquid Temperature
- Temperatura tekočine
- Temperatura tekućine

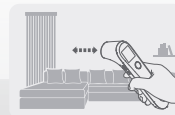

- Ambient Temperature
- Temperatura prostora
- Sobna temperatura

**Natančnost
glede na
starost**

Za natančno merjenje izberite starost bolnika

**Točnost
obzirom na
dob**

Odaberite dob pacijenta za točno mjerenje

EN Mediblink Infrared Forehead Thermometer Age Accuracy™ M330

Intended Use: The infrared forehead thermometer Age Accuracy™ is intended for the intermittent measurement of human body temperature from the skin surface of forehead. The device can be reused by people of all ages for home and clinical use. It is fast, has an age setting option for accurate measurement, silent/night mode and can store the last 30 measurements. Reference body site: oral. This thermometer converts the forehead temperature (range: 34.0–43.0°C) to display its "oral equivalent". Operating mode: Adjust mode (Forehead mode). It can also measure temperature of object, liquid & ambient (range: 0–100°C). Warranty is 3 years. **Content:** 1x Infrared forehead thermometer, 1x Storage case, 1x Instructions for use, 2x 1.5V AAA batteries.

Warning: Do not allow children to take their temperature unsupervised, some parts are small enough to be swallowed. Do not touch the temperature probe with hands. Never immerse this device in water or other liquids.

SLO Mediblink Infrardeči čelni termometer Age Accuracy™ M330

Predvidena uporaba: Infrardeči čelni termometer Age Accuracy™ je namenjen občasnemu merjenju temperature človeškega telesa na površini čela. Napravo lahko večkrat uporabljajo osebe vseh starosti za domačo in klinično uporabo. Je hiter, ima možnost nastavitve starosti za natančno merjenje, tihi/nočni način in lahko shrani zadnjih 30 meritev. Referenčno mesto telesa: ustna votlina. Ta termometer pretvori temperaturo na čelu (razpon: 34.0–43.0 °C) v njen »oralni ekvivalent«. Način delovanja: Nastavitveni način (način za merjenje na čelu). Meri lahko tudi temperaturo predmeta, tekočine in prostora (razpon: 0–100 °C). Garancija je 3 leta. **Vsebina:** 1x infrardeči termometer, 1x etui za shranjevanje, 1x navodila za uporabo, 2x baterija 1,5 V AAA.

Opozorilo: Otrokom ne dovolite, da si brez nadzora merijo temperaturo, saj so nekateri deli termometra dovolj majhni, da jih je mogoče pogoltniti. Temperaturne sonde se ne dotikajte z rokami. Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Zastopnik in distributor za SLO: Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje, Tel.: +386(0)730-44-555; www.prolat.si

HR Mediblink Infracrveni termometar za mjerenje na čelu Age Accuracy™ M330

Namjena: Infracrveni termometar za mjerenje na čelu Age Accuracy™ namijenjen je povremenom mjerenju temperature ljudskog tijela na površini kože čela. Uređaj mogu ponovno koristiti osobe svih dobnih skupina za kućnu i kliničku uporabu. Brz je, ima mogućnost postavljanja dobi za točno mjerenje, tihi/noćni način rada i može pohraniti zadnjih 30 mjerenja. Referentno mjesto na tijelu: oralno. Ovaj termometar pretvara temperaturu čela (raspon: 34,0–43,0 °C) i prikazuje njen »oralni ekvivalent«. Način rada: Način podešavanja (način mjerenja na čelu). Također može mjeriti temperaturu objekta, tekućine i sobnu temperaturu (raspon: 0–100 °C). Jamstvo je 3 godine. **Sadržaj:** 1x infracrveni termometar za mjerenje na čelu, 1x torbica za pohranu, 1x Uputstva za upotrebu, 2x 1,5 V baterije AAA.

Upozorenje: Ne dopustite djeci da mjere temperaturu bez nadzora, neki dijelovi su dovoljno mali da ih se može progutati. Ne dirajte temperaturnu sondu rukama. Nikada ne uranjajte ovaj uređaj u vodu ili druge tekućine.

Zastupnik i distributor za HR: Golija d.o.o., XI Vrbik 3, 10000 Zagreb, Tel.: +385(0)161-98-496; www.golia.hr

Importer for EU & Distributor/Uvoznik za EU & distributor: Mediblink d.o.o., Gubčeva cesta 19, 8210 Trebnje, Slovenija

JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No.365, Wuzhou Road,
311100 Hangzhou, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail: info@sejoy.com
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
E-mail: shholding@hotmail.com

CE 0123

1.0, 1.3.2025



6 942284 605820

