



Silent operation
Geräuschloser
Betrieb
Tiho delovanje
Tihi rad



2 Levels of suction
2 Stufen der
Absaugung
2 stopnje sesanja
2 stupnja isisavanja



Portable and small
Tragbar und klein
Prenosen in majhen
Prijenosan i malen



Easy to clean
Leicht zu reinigen
Enostavno čiščenje
Lako se čisti



Works with AA batteries or
with the included USB-C cable
Funktioniert mit
AA-Batterien oder mit dem
mitgelieferten USB-C Kabel
Deluje z AA baterijami ali s pomočjo priloženega
USB-C kabla
Radi s AA baterijama ili pomoću priloženog
USB-C kabela



Safe to use for all ages
Sicher in der Anwendung für alle Altersgruppen
Varna uporaba za osebe vseh starosti
Sigurno za korištenje za sve uzraste



2 Soft Silicone nozzle tips for gentle suction
2 weiche Silikondüsen für sanftes Saugen
2 nastavka iz mehkega silikona za nežno isisavanje
2 mekana silikonska nastavka za nježno isisavanje



Use the melody to keep your baby calm
Verwenden Sie die Melodie, um Ihr Baby zu beruhigen
Uporabite melodijo, da pomirite otroka
Upotrijebite melodiju kako biste smirili dijete

Mediblink®
medical devices


Electric Nasal Aspirator SuperEasy PRO M410



www.mediblink.com

3 YEARS
WARRANTY

Anti-Overflow Technology Anti-Überlauf Technologie Tehnologija za preprečevanje preliivanja Tehnologija protiv prelijevanja

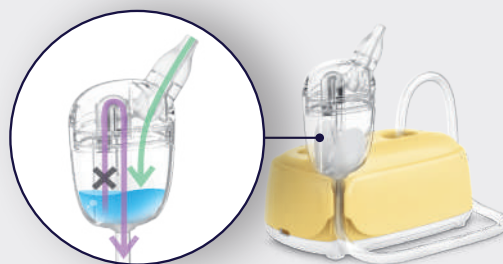


EN SuperEasy PRO is designed to ensure that liquid (mucus) cannot pass beyond the collection cup into the connecting tube or the device's motor. This extends the device's lifespan, ensures reliable operation, and provides an excellent user experience.

DE Der SuperEasy PRO ist so konzipiert, dass Flüssigkeit (Schleim) nicht über den Auffangbehälter in den Verbindungsschlauch oder den Motor des Geräts gelangen kann. Dies verlängert die Lebensdauer des Geräts, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und bietet ein hervorragendes Benutzererlebnis.

SLO SuperEasy PRO je zasnovan tako, da tekočina (nosni izcedek) ne more preiti mimo zbiralne posodice v priključno cev ali motor naprave. To podaljšuje življenjsko dobo naprave, zagotavlja zanesljivo delovanje in nudi odlično uporabniško izkušnjo.

HR SuperEasy PRO je dizajniran tako da tekućina (sluz) ne može prijeći izvan spremnika u spojnu cijev ili motor uređaja. To produžuje vijek trajanja uređaja, osigurava pouzdan rad i pruža izvrsno korisničko iskustvo.

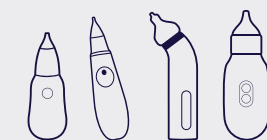

EN Nasal aspirators without overflow protection technology break down quickly. Liquid (mucus) can easily enter the motor, causing damage or even destroying the aspirator.

DE Nasensauger ohne Überlaufschutztechnologie gehen schnell kaputt. Flüssigkeit (Schleim) kann leicht in den Motor eindringen und das Gerät beschädigen oder sogar zerstören.

SLO Nosni aspiratorji brez tehnologije za preprečevanje preliivanja se hitro pokvarijo. Tekočina (nosni izcedek) lahko hitro prodre v motor kar poškoduje ali uniči aspirator.

HR Nosni aspiratori bez tehnologije za zaštitu od prelijevanja brzo se kvare. Tekućina (sluz) može lako prodrijeti u motor, što može oštetiti ili čak uništiti aspirator.

EN Mediblink Electric nasal aspirator SuperEasy PRO M410

Intended Use: The device which is a portable, handheld, reusable, battery-powered suction device, is intended to enable an adult to gently suction and clear excessive mucus from the nasal passages of an infant or child to facilitate easier breathing in home care. The aspirator features a handy design and is both safe and easy to use. Two different sizes of soft silicone nozzle tips enable safe product use. Aspirator offers highly efficient suction with two speed levels, a child-friendly, low-noise suction function (<50 dB) and music function. Compared to regular battery-powered aspirators, the SuperEasy PRO is designed to effectively prevent nasal mucus from entering the motor. This extends the lifespan of the device, ensures reliable performance, and provides an excellent user experience. The suction nozzle tips, collection cover and cup are removable and can simply be cleaned under running water and disinfected. The warranty period is three years. **Content:** 1 Nasal aspirator, 1 Collection cup, 1 Connecting tube (80cm), 2 Suction nozzle tips, 2 Sealing rings, 1 Storage case, 1 User manual, 2 AA alkaline batteries and 1 USB-C cable.

Warnings: Nasal aspirator is only suitable for sucking nasal secretions. Please do not use it for other purposes. If the user's nose is dry, it should be humidified first. Keep the nozzle tips clean and sanitary when in use. Keep the aspirator out of the reach of children under 8 years old. Potential choking hazard. Do not immerse the main part of aspirator in water or other liquids, and do not rinse it directly under the tap. Read the instructions for use before using the aspirator.

DE Mediblink Elektrischer Nasensauger SuperEasy PRO M410

Verwendungszweck: Bei dem Gerät handelt es sich um ein tragbares, wiederverwendbares, batteriebetriebenes Absauggerät, mit dem ein Erwachsener die Nasengänge eines Säuglings oder Kindes sanft absaugen und von überschüssigem Schleim befreien kann, um das Atmen in der häuslichen Pflege zu erleichtern. Der Sauger hat ein praktisches Design und ist sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung. Zwei verschiedene Größen von weichen Silikondüsen ermöglichen eine sichere Anwendung des Produkts. Der Sauger bietet eine hocheffiziente Absaugung mit zwei Geschwindigkeitsstufen, sowie eine kinderfreundliche, geräuscharme Absaugfunktion (< 50 dB) und Musikfunktion. Im Vergleich zu herkömmlichen batteriebetriebenen Aspiratoren ist der SuperEasy PRO so konstruiert, dass Nasenschleim effektiv daran gehindert wird, in den Motor zu gelangen. Dadurch wird die Lebensdauer des Geräts verlängert, eine verlässliche Leistung sichergestellt und eine exzellente Nutzererfahrung geboten. Die Saugdüsenstippen, der Auffangdeckel und der Becher sind abnehmbar und können einfach unter fließendem Wasser gereinigt und desinfiziert werden. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre. **Inhalt:** 1 Nasensauger, 1 Auffangbehälter, 1 Verbindungsschlauch (80cm), 2 Saugdüsenaufsätze, 2 Dichtungsringe, 1 Aufbewahrungsbox, 1 Gebrauchsanweisung, 2 AA-Alkalibatterien und 1 USB-C-Kabel.

Warnungen: Der Nasensauger ist nur zum Entfernen von Nasensekret geeignet. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Wenn die Nase des Benutzers trocken ist, sollte sie zunächst befeuchtet werden. Halten Sie die Düsenstippen während des Gebrauchs sauber und hygienisch. Bewahren Sie den Absauger außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Potenzielle Erstickungsgefahr. Tauchen Sie den Hauptteil des Saugers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und spülen Sie ihn nicht direkt unter dem Wasserhahn ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Sauger in Betrieb nehmen.

SLO Mediblink Električni nosni aspirator SuperEasy PRO M410

Namen uporabe: Izdelek je prenosni, ročni pripomoček za isisavanje nosne sluzi za večkratno uporabo, ki ga napaja baterija, in je namenjen odraslim osebam, da nežno isesajo in odstranijo prekomerno sluz iz otrokovih nosnih poti ter mu tako olajšajo dihanje pri negi na domu. Aspirator ima priročno obliko ter je varen in enostaven za uporabo. Dve različni velikosti nosnih nastavkov iz mehkega silikona omogočata varno uporabo izdelka. Aspirator ponuja zelo učinkovito isisavanje z dvema stopnjama moči, otrokom prijazno funkcijo isisevanja, z nizko stopnjo hrupa (< 50 dB) in glasovno funkcijo. V primerjavi z običajnimi baterijskimi aspiratorji je SuperEasy PRO zasnovan tako, da učinkovito preprečuje vdor nosne sluzi v motor. To podaljša življenjsko dobo naprave, zagotavlja zanesljivo delovanje in nudi odlično uporabniško izkušnjo. Nosna nastavka, pokrov zbiralnika in posodico je mogoče odstraniti in jih preprosto očistiti pod tekočo vodo ter dezinficirati. Garancija velja tri leta. **Vsebina:** 1 nosni aspirator, 1 zbiralna posodica, 1 povezovalna cev (80 cm), 2 nosna nastavka, 2 tesnilna obročka, 1 skatlica za shranjevanje, 1 navodila za uporabo, 2 AA alkalni bateriji in USB-C kabel.

Opozorila: Nosni aspirator je primeren le za odstranjevanje nosnih izločkov. Ne uporabljajte ga v druge namene. Če je otrokov nos izsušen, ga je treba naprej navlažiti. Nosni nastavki naj bodo pred uporabo čisti in higiensko neoporečni. Aspirator hranite zunaj dosegu otrok, mlajših od 8 let. Potencialna nevarnost zadušitve. Glavni del aspiratorja ne potopljajte v vodo ali druge tekočine in ga ne spirajte neposredno pod tekočo vodo. Pred uporabo aspiratorja preberite navodila za uporabo.

Zastopnik in distributer za SLO: Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje, Tel.: +386(0)730-44-555; www.prolat.si

HR Mediblink Električni nosni aspirator SuperEasy PRO M410

Namjena upotrebe: Uređaj koji je prijenosni, ručni, za višekratnu upotrebu – uređaj za isisavanje na baterije namijenjen je upotrebi odrasle osobe u kućnoj njezi da nežno isisa i ukloni višak sluzi iz nosnih prolaza bebe odnosno djeteta kako bi se olakšalo disanje. Aspirator ima praktičan dizajn te je siguran i jednostavan za korištenje. Dvije različite veličine mekih silikonskih nastavaka omogućuju sigurnu upotrebu proizvoda. Aspirator nudi visoko učinkovito isisavanje iscedaka iz nosa s dve razine brzine s niskom razinom buke prilagođenu djeći (<50dB) i glazbenu funkciju. U usporedbi s običnim baterijskim aspiratorima, SuperEasy PRO je dizajniran tako da učinkovito sprječava da nosna sluz uđe u motor. Time se produžuje vijek trajanja uređaja, osigurava pouzdan rad i pruža izvrsno korisničko iskustvo. Nastavci, poklopac posudice za sakupljanje iscedaka iz nosa i čašica odvojni su i mogu se lako očistiti pod mlazom vode i dezinficirati. Jamstveni rok je tri godine. **Sadržaj:** 1 nosni aspirator, 1 spremnik, 1 spojna cijev (80cm), 2 nastavka za isisavanje, 2 brtvena prstena, 1 kutijica za pohranu, 1 korisnički priručnik, 2 AA alkalne baterije, USB-C kabel.

Upozorenja: Nosni je aspirator prikladan samo za uklanjanje iscedaka iz nosa. Ne koristite ga u druge svrhe. Ako je nos suh, prvo ga treba ovlažiti. Održavajte silikonske nastavke čistima i higijenskim tijekom upotrebe. Aspirator držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Potencijalna opasnost od gušenja. Ne uranjajte kućste aspiratora u vodu ili druge tekućine i ne spirajte ga izravno pod slavinom. Prije upotrebe aspiratora pročitajte uputstva za upotrebu.

Zastupnik i distributer za HR: Gola d.o.o., XI Vrbik 3, 10000 Zagreb, Tel.: +385(0)161-98-496; www.gola.hr

Vapo Healthcare Co., Ltd
Southern Unit of the Third Floor Building B,
No. 99 Yu Dai West Rd, High Tech District,
Kunshan, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China

EU REP

Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany



e-FU: <http://www.mediblink.com/v/m410.pdf>

Mediblink® is a registered trademark.
©Packaging design is copyright. No infringements of
our trademarks and copyright material is allowed.
www.mediblink.com



Manufactured for (importer for
EU & distributor) / Hergestellt für
(importeur für EU & distributor) /
Proizvedeno za (uvoznik za EU &
distributor): Mediblink d.o.o.,
Gubčeva cesta 19, 8210 Trebnje,
Slovenija

1.0, 30.9.2025

