

VšiVen[®] PLUS

120 ml

ZA ODSTRANJEVANJE NAGLAVNIH UŠI IN GNID



Pred uporabo medicinskega pripomočka natančno preberite navodilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Predvideni namen: VšiVen[®] PLUS za odstranjevanje naglavnih uši in gnid je medicinski pripomoček namenjen lokalni uporabi na laseh in lasišču za odstranjevanje naglavnih uši (*Pediculus capitis*) in preprečevanje razvoja gnid.

Klinične koristi:

- Odstranjevanje naglavnih uši in gnid.
- Lajšanje srbenja.

Način delovanja:

Glavni predvideni namen losjonov proti naglavnim ušem na človeškem lasišču ni dosežen s farmakološkimi, imunološkimi ali presnovnimi mehanizmi, temveč temelji na njihovih fizikalnih lastnostih. Znano je, da način delovanja temelji na fizikalnih mehanizmi in ne na nevrotoksičnosti. Prevladujoča sestavina losjonov proti naglavnim ušem je dimetikon. Natančen način delovanja dimetikona (zadušitev uši zaradi blokade zunanjih dihalnih poti) ni pojasnjen. Obstajajo dokazi, da zamašitev zračnikov in trahealnih debel s silikonskimi usedlinami ustvari pregrado, ki zavira izločanje vode, kar povzroči osmotski stres, ki privede do rupture črevesja uši. Tokoferil acetat (ester vitamina E) verjetno deluje na podoben način kot dimetikon. Losjoni proti naglavnim ušem torej delujejo prek dveh fizikalnih mehanizmov – blokade zunanjih dihalnih poti, ki povzroči zadušitev uši in zaviranja izločanja vode, kar povzroči osmotski stres in rupturo črevesja uši. Mehanizem delovanja je izključno fizikalen, kar pomeni da predvideni namen uporabe ni dosežen s farmakološkimi, imunološkimi ali presnovnimi mehanizmi.

Indikacije:

- Pedikuloza (ušivost).

Medicinski pripomoček je namenjen laični uporabi. Primeren je za odrasle osebe, nosečnice, doječe matere in otroke starejše od 6 mesecev (pod nadzorom odrasle osebe).

Kako se uporablja VšiVen[®] PLUS za odstranjevanje naglavnih uši in gnid?

1. Pred uporabo šampona preverite prisotnost naglavnih uši pri vseh družinskih članih. Vse osebe, pri katerih so naglavne uši prisotne, je treba zdraviti v istem dnevu, da se prepreči ponovni prenos.

2. Ramena osebe, pri kateri boste uporabili šampon, prekrijte z brisačo.

3. Odvijte pokrovček aplikatorja. Šampon nanesite na lase enakomerno od čela do vrha glave ter od vrha glave do ušes in tilnika. Potrebna količina šampona je odvisna od tipa in dolžine las. Za lase, ki segajo do ramen, je potrebnega 30–50 ml šampona.

4. Nanesite zadostno količino šampona na lase in lasišče. Dobro vtrite šampon od korenin do konic las. Pustite delovati 15 minut. V primeru hujše okužbe z naglavnimi ušmi lahko šampon pustite delovati do 30 minut.

5. Šampon temeljito izperite z uporabo vašega običajnega šampona in tople vode. Pri daljših laseh se priporoča uporaba balzama za lase.

6. Lase počesite z navadnim glavnikom in jih razdelite na 1 cm široke pramene. Posamezne pramene večkrat prečesite s priloženim kovinskim glavnikom, da odstranite odmrle naglavne uši in gnide. Lase začnite česati čim bližje koreninam las. Že prečesane pramene, s katerih ste odstranili naglavne uši in gnide, ločite od še neprečesanih las.

7. Glavnik po vsaki uporabi operite s toplo vodo in milom. Po 7–9 dneh ponovite postopek odstranjevanja naglavnih uši, da odstranite morebitne novo izležene naglavne uši.

8. Operite vsa uporabljena oblačila, odeje in brisače pri temperaturi 60 °C. Razkužite vse glavnike, krtače za lase ipd. Posesajte in/ali pomijte tla. Vrečko po sesanju odstranite iz sesalca in zavržite.

Kontraindikacije:

Otroci mlajši od 6 mesecev.

Znana preobčutljivost na katerokoli sestavino izdelka.

Odprte oziroma nezaceljene rane na lasišču ali kako drugače poškodovana koža lasišča.

Stranski učinki: Alergijske reakcije.

Sestavine:

dimetikon, tokoferil acetat, olje sladkega mandljevca (*Prunus Amygdalus Dulcis*), olje mareličnih jedrc (*Prunus Armeniaca*).

Pomembno opozorilo:

Samo za zunanjo uporabo.

V primeru zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

V primeru, da so plazeče uši po zaključenem tretmaju še vedno prisotne, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Izogibajte se stiku z očmi. Če pride proizvod v stik z očmi, oči temeljito sperite z veliko čiste hladne vode.

Previdnostni ukrepi:

Ne uporabljajte po preteku roka uporabe navedene na embalaži.

Vsak resen zaplet, ki je povezan z uporabo medicinskega pripomočka, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice uporabnika. Ob pojavu resnega zapleta z medicinskim pripomočkom le-tega ne smete ponovno uporabiti.

Shranjevanje:

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Po uporabi zaprite plastenko in jo shranite v originalni embalaži skupaj z navodilom za uporabo.

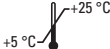
Vsebina pakiranja:

raztopina v plastenki z aplikatorjem + kovinski glavnik

Odstranjevanje medicinskega pripomočka:

Prazno plastenko dobro splaknite z vodo in reciklirajte v skladu z lokalnimi smernicami ločevanja odpadkov. Ostale dele embalaže odložite v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov glede na vrsto materiala (glejte simbol za recikliranje).

Datum izdaje zadnje revizije navodil za uporabo: 1.2.2025

Glejte navodila za uporabo		Ne onesnažujte okolja (uporabljeno embalažo odvrzite v primeren zabojnik)	
Številka serije			
Uporabno do		Proizvajalec	
Temperaturne omejitve		Edinstveni identifikator pripomočka	



Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové
Czech Republic

www.muller-pharma.com

Distributer:

SunEarth Lifecare d.o.o.

Borovec 13, 1236 Trzin

info@suneearthlifecare.com

**Dr. Müller
PHARMA**